

NexiusZoom

(EVO) & ESD

HIGHLIGHTS

- Binokular- und trinokulare Köpfe mit HWF 10x/22 mm oder HWF 10x/23 mm Okular (EVO)
- Zoom 1:6,7, von 6,7x bis 45x oder 1:8,4, von 6,5x bis 55x
- Ergonomische stativ
- Doppelte 3W LED-Beleuchtung
- Konfigurationen bis zu 220 facher Vergrößerung
- Große Arbeitsabstände
- ESD-sichere Modelle verfügbar
- 10 Jahre Garantie auf alle optischen und mechanischen Komponenten

TECHNISCHE DATEN

OKULARE

Das NexiusZoom wird geliefert mit einem Paar HWF 10x/ 22 mm Okularen

Das NexiusZoom Evo wird geliefert mit einem Paar HWF 10x/ 23 mm Okularen

KOPF

Binokularer und trinokularer Kopf mit 45° geneigtem Tubus. Beide Okulare mit ± 5 Dioptrienanpassung. Augenabstand einstellbar von 54 mm bis 75 mm.

Der Trinokularkopf wird mit einem Strahlteiler mit festem Lichtweg geliefert (50:50). Die NexiusZoom EVO-Modelle sind jetzt mit Klick-Stops ausgestattet

OBJEKTIVE

Das Standard NexiusZoom ist ausgestattet mit einem plan achromatischen 1:6,7 Objektiv mit 0,67x zu 4,5x Vergrößerung. Sichtfeld von 33 mm bis 4,9 mm. Großer Arbeitsabstand von 110 mm

Das NexiusZoom Evo st ausgestattet mit einem plan achromatischen 1:8,4 Objektiv mit 0,65x zu 5,5x Vergrößerung. Sichtfeld von 35,4 mm bis 4,2 mm. Großer Arbeitsabstand von 110 mm

Vorsatzlinse 0,3x / 0,4x / 0,5x / 0,75x / 1,5x und

2,0x sind verfügbar. Alle Objektive sind Anti-Pilz behandelt



APL (ANTIMIKROBIELLE BESCHICHTUNG)

APL (Antimicrobial Protection Layer) ist eine revolutionäre Farbbehandlung für die kritischsten Teile unserer Produkte. Ein Mikroskop mit APL schränkt den Wachstum von Mikroorganismen, einschließlich Bakterien und Schimmelpilzen deutlich ein



● NZ.1903-S

NZ.1903-S / NZ.1703-S	339 (h) x 256 (w) x 311 mm (d) 5.1 kg
NZ.1903-P / NZ.1703-P	299 (h) x 256 (w) x 311 mm (d) 5.2 kg

Gewicht anderer Produkte siehe Tabelle

POLARISIERUNG

Der NexiusZoom kann optional mit einem um 360° drehbaren Rundtisch mit eingebautem Polarisationsfilter und/oder einem optional drehbaren Analysatorfilter in einer Halterung geliefert werden, die unter das Objektiv geschraubt wird



● NexiusZoom EVO NZ.5313

● NZ.5302 / NZ.5303

STATIVE

- Ergonomisch gestaltetes Säule- oder Zahnstangenstativ mit 3W-Auflicht- und 3W-Durchlicht-LED-Beleuchtung (-P- und -S- Stativ)
- Ergonomisch gestaltetes Säulenstativ mit zwei 3W-Schwanenhalsauflicht-LED-Beleuchtungen auf jeder Seite und einer 3W-Durchlicht-LED-Beleuchtung (-PG-Standfuß)
- Ergonomischer Säulenständer mit drehbarem Spiegel und 3W-LED-Durchlicht- und Auflichtbeleuchtung (-M-Stativfuß)
- Ergonomisch gestaltete Universal- oder Auslegerstative ohne Beleuchtung (-U-, -B- und BC-Standfüße)
- Gelenkarmstativ für den Tisch oder schweren Desktop-Ständer, beide ohne Kopfhalter, ohne Beleuchtung (-A und -AP Ständer)
- Leichtes Gelenkarmstativ, mit Kopfhalter, ohne Beleuchtung (NZ.9047)

Alle Säulen- und Zahnstangenständer werden mit zwei Objektklammern geliefert.
Legierter Metallguss, gehärtete Beschichtung

KREUZZTISCH

NEU: 180 x 155mm X / Y Kreuztisch mit 76 x 55mm Objektstisch und transparenter Glasplatte für NexiusZoom, im Stativ ist der Fuß des Mikroskops befestigt. Nur verfügbar mit neuen Mikroskopen (wegen Befestigung), muss direkt mit dem Kauf eines Mikroskops bestellt werden
(Sehe Bild: NZ.9505)

BELEUCHTUNG

3W Durchlicht- und Auflicht-LED-Strahler mit interner Stromversorgung 100-240V. Beide Strahler können gleichzeitig verwendet werden und die Lichtintensitäten können separat eingestellt werden. Die universellen Einzel- oder Doppelarmstative und die Gelenkarmstative können mit den Ringlichtern LE.1974 und LE.1973 mit jeweils 72 oder 144 Power-LEDs ausgestattet werden, die in Segmenten gesteuert werden, ideal zum Erstellen oder Anheben von Schatten



● NZ.9505

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD) MIKROSKOPEN

Für Inspektions- und Montageanwendungen. Elektrostatische Entladung (ESD) ist der plötzliche unerwünschte Stromfluss zwischen zwei elektrisch geladenen Objekten. ESD zu einer Reihe von schädlichen Wirkungen als auch bleibende Schäden an Elektronik-Komponenten führen.

Euromex führt elektrostatisch geschützte Mikroskope in der NexiusZoom-Serie ein. Der Körper und der Stativfuß des Mikroskops sind mit einem speziellen, statisch ableitfähigen Lack überzogen, der schädliche elektrostatische Entladungen verhindert, so dass die Mikroskope für alle statisch empfindlichen Umgebungen geeignet sind

VERPACKUNG

Mit Netzstecker, ein Paar Augenmuscheln, Staubschutzhülle und Bedienungsanleitung in Styroporbox



● NZ.9047 mit NexiusZoom-Kopf

NEXIUSZOOM 0.67- 4.5 (WF 10X/22MM)


MODELLE	Bino	Trino	Säulen- stativ (-P)	Zahnstangen- stativ (-S)	Universal- stativ (-U)	Doppelarm- stativ mit Grundplatte (-B)	Doppelarm-stativ mit Tischklemme (-BC)	Artikulierten Arm-stativ mit Tischklemme (-A)	Artikulierten Arm-stativ mit Grundplatte (-AP)	2 Stück flexiblen Schwanenhals Lichtleitern (-PG)	Spiegel- LED (-M)	Gewicht (kg)
NZ.1902-P	•		•									5.0
NZ.1902-PG	•		•							•		5.1
NZ.1902-M	•		•								•	4.9
NZ.1902-S	•			•								4.9
NZ.1902-U	•				•							15.6
NZ.1902-B	•					•						22.1
NZ.1902-BC	•						•					10.5
NZ.1902-A	•							•				8.6
NZ.1902-AP	•								•			20.7
NZ.1903-P		•	•									5.2
NZ.1903-PG		•	•							•		5.3
NZ.1903-M		•	•								•	5.1
NZ.1903-S		•		•								5.1
NZ.1903-U		•			•							15.7
NZ.1903-B		•				•						22.2
NZ.1903-BC		•					•					10.6
NZ.1903-A		•						•				8.7
NZ.1903-AP		•							•			20.8

NEXIUSZOOM EVO 0.65-5.5 (WF 10X/23MM)

MODELLE	Bino	Trino	Säulen- stativ (-P)	Zahnstangen- stativ (-S)	Universal- stativ (-U)	Doppelarm- stativ mit Grundplatte (-B)	Doppelarm-stativ mit Tischklemme (-BC)	Artikulierten Arm-stativ mit Tischklemme (-A)	Artikulierten Arm-stativ mit Grundplatte (-AP)	2 Stück flexiblen Schwanenhals Lichtleitern (-PG)	Spiegel- LED (-M)	Gewicht (kg)
NZ.1702-P	•		•									5.0
NZ.1702-PG	•		•							•		5.1
NZ.1702-M	•		•								•	4.9
NZ.1702-S	•			•								4.9
NZ.1702-U	•				•							15.6
NZ.1702-B	•					•						22.1
NZ.1702-BC	•						•					10.5
NZ.1702-A	•							•				8.6
NZ.1702-AP	•								•			20.7
NZ.1703-P		•	•									5.2
NZ.1703-PG		•	•							•		5.3
NZ.1703-M		•	•								•	5.1
NZ.1703-S		•		•								5.1
NZ.1703-U		•			•							15.7
NZ.1703-B		•				•						22.2
NZ.1703-BC		•					•					10.6
NZ.1703-A		•						•				8.7
NZ.1703-AP		•							•			20.8

Die NexusZoom EVO-Modelle sind jetzt mit Klick-Stops ausgestattet

DIMENSIONEN

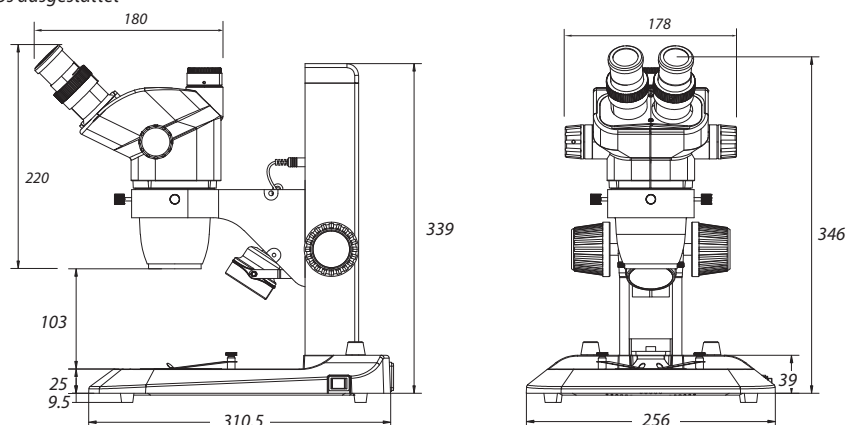




● NZ.1902-P



● NZ.1902-U



● NZ.1902-BC

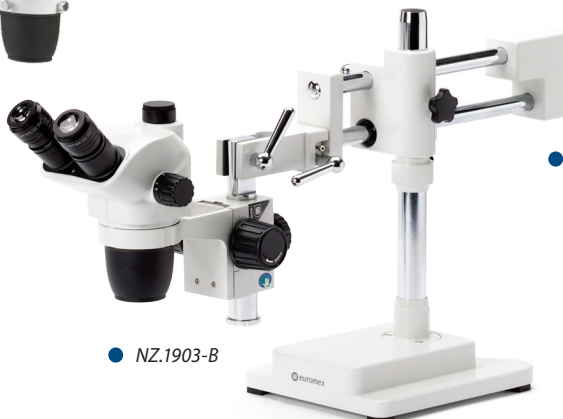

● NZ.1903-B



● NZ.1902-PG



● NZ.1902-M



● NZ.1902-A



● NZ.1902-AP



● NZ.1903-S

VERGRÖßERUNG

NexiusZoom standard & ESD: Arbeitsabstand und Sichtfeld mit Standard HWF 10x/ 22 Okularen vom Standard NexiusZoom

Zoom Vergr.	Vorsatzlinse 0.3x AA 287 mm		Vorsatzlinse 0.4x AA 220 mm		Vorsatzlinse 0.5x AA 183 mm		Vorsatzlinse 0.75x AA 105 mm		Objectiv 1x (standard) AA 110 mm		Vorsatzlinse 1.5x AA 53 mm		Vorsatzlinse 2x AA 34 mm	
	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm
0,67	2,0	109,5	2,7	82,1	3,35	65,7	5,0	43,8	6,7	32,8	10,1	21,9	13,4	16,4
0,7	2,1	104,8	2,8	78,6	3,5	62,9	5,3	41,9	7,0	31,4	10,5	21,0	14,0	15,7
0,8	2,4	91,7	3,2	68,8	4,0	55,0	6,0	36,7	8,0	27,5	12,0	18,3	16,0	13,8
1,0	3,0	73,3	4,0	55,0	5,0	44,0	7,5	29,3	10,0	22,0	15,0	14,7	20,0	11,0
1,5	4,5	48,9	6,0	36,7	7,5	29,3	11,3	19,6	15,0	14,7	22,5	9,8	30,0	7,3
2,0	6,0	36,7	8,0	27,5	10,0	22,0	15,0	14,7	20,0	11,0	30,0	7,3	40,0	5,5
3,0	9,0	24,4	12,0	18,3	15,0	14,7	22,5	9,8	30,0	7,3	45,0	4,9	60,0	3,7
4,0	12,0	18,3	16,0	13,8	20,0	11,0	30,0	7,3	40,0	5,5	60,0	3,7	80,0	2,8
4,5	13,5	16,3	18,0	12,2	22,5	9,8	33,8	6,5	45,0	4,9	67,5	3,3	90,0	2,4

NexiusZoom EVO: Arbeitsabstand und Sichtfeld mit Standard HWF 10x/ 23 Okularen von der NexiusZoom Evo

Zoom Vergr.	Vorsatzlinse 0.3x AA 287 mm		Vorsatzlinse 0.4x AA 220 mm		Vorsatzlinse 0.5x AA 183 mm		Vorsatzlinse 0.75x AA 105 mm		Objectiv 1x (standard) AA 110 mm		Vorsatzlinse 1.5x AA 53 mm		Vorsatzlinse 2x AA 34 mm	
	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm	Totale Vergr.	SF in mm
0,65	1,95	117,9	2,6	88,5	3,25	70,8	4,9	47,2	6,5	35,4	9,8	23,6	13,0	17,7
1,0	3,0	76,7	4,0	57,5	5,0	46,0	7,5	30,7	10,0	23,0	15,0	15,3	20,0	11,5
1,5	4,5	51,1	6,0	38,3	7,5	30,7	11,3	20,4	15,0	15,3	22,5	10,2	30,0	7,7
2,0	6,0	38,3	8,0	28,8	10,0	23,0	15,0	15,3	20,0	11,5	30,0	7,7	40,0	5,8
2,5	7,5	30,7	10,0	23,0	12,5	18,4	18,8	12,3	25,0	9,2	37,5	6,1	50,0	4,6
3,0	9,0	25,6	12,0	19,2	15,0	15,3	22,5	10,2	30,0	7,7	45,0	5,1	60,0	3,8
3,5	10,5	21,9	14,0	16,4	17,5	13,1	26,3	8,8	35,0	6,6	52,5	4,4	70,0	3,3
4,0	12,0	19,2	16,0	14,4	20,0	11,5	30,0	7,7	40,0	5,8	60,0	3,8	80,0	2,9
4,5	13,5	17,0	18,0	12,8	22,5	10,2	33,8	6,8	45,0	5,1	67,5	3,4	90,0	2,6
5,0	15,0	15,3	20,0	11,5	25,0	9,2	37,5	6,1	50,0	4,6	75,0	3,1	100,0	2,3
5,5	16,5	13,9	22,0	10,5	27,5	8,4	41,3	5,6	55,0	4,2	82,5	2,8	110,0	2,1

Zoom Vergr. = Zoom Vergrößerung, AA = Arbeitsabstand, Totale Vergr. = Totale Vergrößerung, SF = Sichtfeld



NZ.8903



NZ.8904



NZ.8905



NZ.8907



NZ.8915



NZ.8920


KOMPATIBILITÄT VORSATZLINSE

MODELLE	0,3x Vergrößerung	0,4x Vergrößerung	0,5x Vergrößerung	0,75x Vergrößerung	1,5x Vergrößerung	2x Vergrößerung
NZ.9000/9005			•	•	•	•
NexiusZoom-P, -M, -PG			•	•	•	•
NexiusZoom-P-ESD			•	•	•	•
NexiusZoom-S				•	•	
NexiusZoom-S-ESD				•	•	
NexiusZoom-A, -AP	•	•	•	•	•	•
NexiusZoom-U, -B, -BC	•	•	•	•	•	•
NexiusZoom-U-ESD, -B-ESD	•	•	•	•	•	•

NexiusZoom ESD

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG (ESD) MIKROSKOPEN

MODELLE	Binokular	Trinokular	Säulen Stativ (-P)	Zahnstangen Stativ (-S)	Einarm-universalstativ (-U)	Doppelarm-Stativ (-B)	Gewicht (kg)
NZ.1902-P-ESD	•		•				5.0
NZ.1902-S-ESD	•			•			4.9
NZ.1902-U-ESD	•				•		15.6
NZ.1902-B-ESD	•					•	22.1
NZ.1903-P-ESD		•	•				5.3
NZ.1903-S-ESD		•		•			5.1
NZ.1903-U-ESD		•			•		15.7
NZ.1903-B-ESD		•				•	22.2

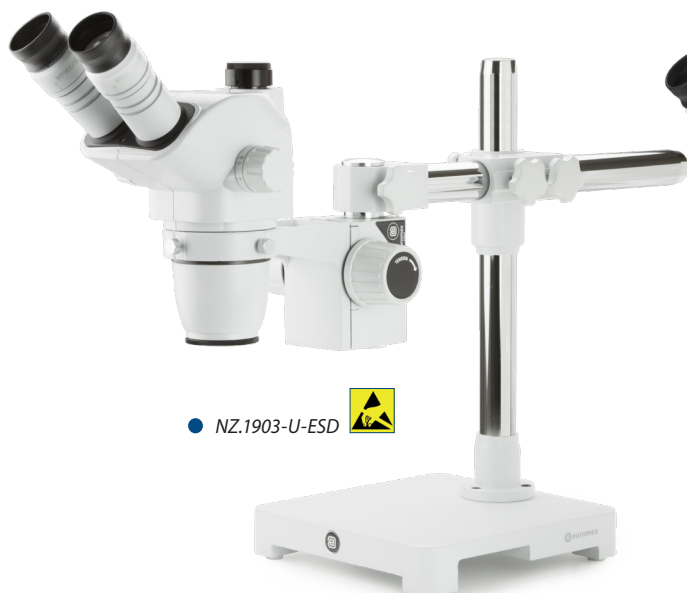

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE

MIKROSKOPKÖPFE & OKULARE

- NZ.5302** NexiusZoom Bino Kopf mit Okular
- NZ.5303** NexiusZoom Trino Kopf ohne Kopfhalter
- NZ.5312** NexiusZoom EVO-Bino Kopf ohne Kopfhalter
- NZ.5313** NexiusZoom EVO Trino Kopf ohne Kopfhalter
- NZ.6010** Paar HWF 10x/22 mm Okulare
- NZ.6010-C** HWF 10x / 22 mm-Okular nur mit Fadenkreuz
- NZ.6010-CM** HWF 10x / 22 mm Okular nur mit 10/100 Mikrometer und Fadenkreuz
- NZ.6015** Paar HWF 15x/16 mm Okulare
- NZ.6020** Paar HWF 20x/12 mm Okulare
- NZ.6099** Paar Augenmuscheln
- NZ.6110** HWF 10x/22 mm Okular mit Mikrometer
- NZ.6210** Paar HWF 10x / 23 mm Ein Paar Okulare für NexiusZoom EVO
- NZ.6210-C** HWF 10x / 23 mm Okular nur mit Fadenkreuz für NZ EVO
- NZ.6210-CM** HWF 10x / 23 mm Okular nur mit 10/100 Mikrometer und Fadenkreuz für NexiusZoom EVO

VORSATZLINSEN

- NZ.8903** Vorsatzlinse 0,3x Linse. Arbeitsabstand 287 mm. Geeignet für A-, AP-, U-, B- und BC-Stativ
- NZ.8904** Vorsatzlinse 0,4x Linse. Arbeitsabstand 220 mm. Geeignet für A-, AP-, U-, B- und BC-Stativ
- NZ.8905** Vorsatzlinse 0,5x Linse. Arbeitsabstand 183 mm (nicht geeignet für S-Stativ)
- NZ.8907** Vorsatzlinse 0,75x Linse. Arbeitsabstand 105 mm
- NZ.8915** Vorsatzlinse 1,5x Linse. Arbeitsabstand 53 mm
- NZ.8920** Vorsatzlinse 2,0x Linse. Arbeitsabstand 34 mm (nicht geeignet für S-Stativ)
- NZ.8950** Schutz-Glasscheibe (für NexiusZoom Kopf)

STATIVE

- NZ.9000** Ergo Säulenstativ ohne Beleuchtung . Höhe 35 cm
- NZ.9005** Ergo Säulenstativ mit einstellbarer 3W-LED-Durchlichtbeleuchtung. Höhe 35 cm
- NZ.9010** Ergo Zahnstangestativ mit LED Illuminatoren
- NZ.9015** Ergo Säulenstativ mit LED Illuminatoren
- NZ.9018** Ergonomisch gestaltetes Säulenstativ mit zwei 3W-Schwanenhals-LED Beleuchtungen auf jeder Seite und 3W LED-Durchlichtbeleuchtung
- NZ.9020** Universal Einarmstativ (ohne NexiusZoom Kopfhalter)
- NZ.9025** Gelenkarmstativ mit Objekttschleppen (ohne NexiusZoom Kopfhalter)
- NZ.9027** Gelenkarmstativ mit schwerem Stativ (ohne NexiusZoom-Kopfhalter)
- NZ.9030** Universal Doppelarmstativ (ohne Nexius Zoom Kopfhalter)
- NZ.9032** Universal-Doppelarmstativ mit Tischklemme ohne NexiusZoom-Halter
- NZ.9042** Stativfuß mit Drehspeigel und übertragener LED Beleuchtung
- NZ.9047** Leichtes Gelenkarmstativ, mit Kopfhalter, ohne Beleuchtung

KOPFHALTER

- NZ.9081** Kopfhalter Ø76 mm für NexiusZoom Kopf auf den Flexarm-Stativ NZ.9025 und NZ.9027
- NZ.9090** NexiusZoom Kopfhalter geeignet für NZ.9000/9005/9015/9017/9020/9030 Säulen-Stativ
- NZ.9095-ADD** NexiusZoom-Kopfhalterung, ADD-ON, mit Grob- und Feintrieb für für NZ.9000/9005/9015/9018/9020/9030/9032 und NZ.9042 Stativ. Nur mit neuen Mikroskopen erhältlich



BELEUCHTUNG

- LE.1973** Ringbeleuchtung mit 144 LEDs mit einstellbarer Lichtintensität. Externes Netzteil 100-240V. Mit Segmentsteuerung. Helligkeit von 23.000 Lux bei einer Höhe von 100 mm und einer Farbtemperatur von 6.500K. Montagedurchmesser zwischen 25-61 mm
- LE.1974** Ringbeleuchtung mit 72 LEDs mit einstellbarer Lichtintensität. Externes Netzteil 100-240V. Mit Segmentsteuerung. Helligkeit von 21.000 Lux bei einer Höhe von 100 mm und einer Farbtemperatur von 6.500K. Montagedurchmesser zwischen 25-61 mm
- LE.5208** Multifunktionale, dual einstellbare LED-Lichtquelle mit flexiblem Schwanenhals. Ausgestattet mit zwei flexiblen Schwanenhalsarmen mit LED-Beleuchtung
- LE.5210** Euromex Kaltlichtbeleuchtung EK-1, 100W Halogen. 110V und 230V verfügbar
- LE.5211** Euromex Kaltlicht-Beleuchtung, 150 W Halogen, 110 V und 230 V Modelle verfügbar
- LE.5211-LED** Euromex-Kaltlicht-Beleuchtungs-LED, 30W-Hochleistungs-LED



- | | |
|--|--|
| <p>LE.5212 Euromex-Beleuchtungsstation mit zwei unabhängig voneinander gesteuerten Schwanenhälsen, einem Ringlicht und einer Durchlichtbeleuchtung am Stativ (siehe Fotos auf dieser Seite)</p> <p>LE.5214 Doppelarmiger Schwanenhals-Lichtleiter, 50 cm lang, 4 mm Kern Durchmesser</p> <p>LE.5215 Dreiarmiger Schwanenhals-Lichtleiter, 50 cm lang, 4 mm Kern Durchmesser</p> <p>LE.5222 Fokussier Kopf geeignet für die Fokussierung Linse LE.5214 und LE.5215 benötigt LE.5224</p> <p>LE.5224 Asphärische Linse für die Einbau in LE.5222</p> <p>LE.5260 Austauschbare Hochleistungslichtleiter (Standard) weiß 6500K für NZ.9018 / LE.5207 / LE.5212, 1 Stück</p> <p>LE.5261 Austauschbarer, flexibler Hochleistungsarm 365nm für NZ.9018 / LE.5207 / LE.5212, 1 Stück</p> <p>LE.5262 Austauschbarer, flexibler Hochleistungsarm 395nm für NZ.9018 / LE.5207 / LE.5212, 1 Stück</p> <p>LE.5263 Austauschbarer Hochleistungsarm 420nm für NZ.9018 / LE.5207 / LE.5212, 1 Stück</p> <p>LE.5264 Polarisationsfilter, zu schrauben an die austauschbare positionierbare Schwanenhals- Lichtleiter für NZ.9018, LE.5207 oder LE.5212, 1 pc</p> | <p>NZ.9045 Fallschutzring für NexusZoom-Säulen. Hinweis: Ein- und zweiarmlige Ständer werden standardmäßig mit diesem Ring geliefert</p> <p>NZ.9570 Paar Objektklemmen für Tisch</p> <p>NZ.9572 Einstellbare GEM-Objektklemme für -P, -PG und -S stativ</p> <p>NZ.9850 C-mount Adapter mit 0,5x Linse für 1/2" Kameras (nur für NZ.1903 Modellen)</p> <p>NZ.9950 Tischplatte Milchglas</p> <p>NZ.9956 Tischplatte Schwarz/Weiß, Ø 90 mm</p> <p>NZ.9958 Objektplatte aus Standardglas, undurchsichtig, Ø 90 mm</p> <p>NZ.9983-R 3W LED-Ersatzgerät für NexusZoom, Durchlichtbeleuchtung</p> <p>NZ.9983 3W LED-Ersatzgerät für NexusZoom, Auflichtbeleuchtung</p> <p>AE.5130 Universal SLR-Kamera Adapter mit 2x Vergrößerungslinse für 23,2 mm Tubus. Braucht einen T2 adapter</p> <p>AE.5025 T2 Adapter für Nikon D Digital-SLR-Kameras</p> <p>AE.5040 T2 Adapter für Canon EOS Digital-SLR-Kameras
Alternative T2 Adapter auf Anfrage</p> <p>AE.5168-NZ Heiztisch mit PID-Regler bis zum 50 ° C. Nur beim Kauf eines neuen Mikroskops</p> <p>AE.9916 Euromex Staubschutzhülle, extra groß (50 x 68 cm)
NZ = NexusZoom</p> |
|--|--|

Mehr Beleuchtungsoptionen auf www.euromex.com

TISCHE

- NZ.9505** Objektstisch 180 x 155 mm mit X-Y Kreuztisch 75 x 55 mm und transparenter Glasplatte
- NZ.9524** 360° Drehbare Runde Tisch mit Polarisator für NexusZoom
- NZ.9525** 360° Drehbare Analysator für NexusZoom für unter Mikroskop Kopf
- AE.1960** Runder Positioniertisch

SONSTIGES

- AE.1112** Objekt-Mikrometer 50 mm/500 Teile auf Objektträger 76 x 26 mm
- PB.5245** Lens cleaning paper, 100 sheets per pack
- PB.5274** Iso propyl alcohol 99%, 200 ml
- PB.5275** Reinigungsset: Linsenflüssigkeit, fusselfreies Linsentuch / Papier, Bürste, Luftgebläse, Wattestäbchen
- PB.5276** Mikroskop-Pflege- und Wartungsset, 16 Stück: Reinigungsbürste, 6-tlg. Schraubendreher-Set, Luftgebläse, 3-tlg. Innensechskantschlüssel 1,5, 2,5 mm, Linsenreinigungsflüssigkeit 20 ml, Reinigungstuch 140 x 140 mm, 100 Stück Linsentücher, Tube Wartungsfett, 10 ml Flasche Öl, verpackt in einem Werkzeugkasten
- NZ.9520** Polarisierung Kit für NexusZoom, 360° drehbare Runde Tisch mit Polarisator (SB.9524) und 360° drehbare Analysator für unter Mikroskop Kopf (SB.9525)
- NZ.9040** Dunkelfeldaufsatz für NexusZoom



● Der LE.5212 in zwei verschiedenen Ausführungen



www.euromex.com

